

尿素(Urea)检测试剂盒(脲酶波氏微板法)

产品简介:

尿素(Urea)又称碳酰胺(carbamide), 是哺乳动物和某些鱼类体内蛋白质代谢分解的主要含氮终产物, 也是目前含氮量最高的氮肥; 尿素检测方法大致分为化学方法和酶学方法, 后者被认为是间接方法, 先经尿素酶(脲酶)分解尿素为铵离子, 然后根据波氏反应检测铵离子的生成量。

Biorigin尿素(Urea)检测试剂盒(脲酶波氏微板法)检测原理是尿素酶水解尿素, 产生氨和二氧化碳, 氨在碱性条件下与苯酚等反应生成蓝色吲哚酚, 吲哚酚的生成量与尿素含量成正比, 通过酶标仪测定 560nm 处吸光度, 该试剂盒可用于测定人体、动物的血浆、血清、尿液等样品中尿素(旧称尿素氮, BUN)含量, 但尿液最好经过处理后再行检测。该试剂盒仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

名称 \ 编号	BN27505 100T	Storage
试剂(A): 尿素标准(100mmol/L)	1ml	4°C
试剂(B): 脲酶溶液	0.2ml	-20°C 避光
试剂(C): 脲酶稀释液	3ml	RT
试剂(D): Urea 显色液	10ml	4°C 避光
试剂(E): Urea Assay Buffer	10ml	4°C 避光
试剂(F): ddH ₂ O	10ml	RT
使用说明书	1 份	

自备材料:

1、水浴锅或恒温箱、离心管或小试管、酶标仪、96孔板、无氨蒸馏水、沸石

操作步骤(仅供参考):

1、准备样品:

- ①血浆、血清: 血浆、血清按照常规方法制备, 直接用于该试剂盒的测定, -20°C冻存。
- ②尿液: 尿液样品最好处理后测定, 方法如下: 取 0.6ml 尿液样品, 加入沸石 0.3g, 加入无氨蒸馏水至 15ml, 反复震荡数次, 吸附尿液中的游离铵盐, 静置后, 吸取稀释尿液, 所测结果乘以 25, 如果尿液比较少, 可以等比例减少各试剂的使用量。如果取 1ml 尿液样品, 应加入沸石 0.5g, 加入无氨蒸馏水至 25ml, 反复震荡数次, 吸附尿液中的游

本产品仅用于科研

离铵盐，静置后，吸取稀释尿液，所测结果乘以 25。

- 2、配制标准品工作液：取适量的尿素标准(100mmol/L)，按尿素标准(100mmol/L)：ddH₂O=1:19 的比例混合，使尿素浓度达到 5mmol/L，即为标准品工作液-尿素标准(5mmol/L)；4℃保存，1 周有效。
- 3、配制脲酶工作液：取适量的脲酶溶液，按脲酶溶液：脲酶稀释液=1:99 的比例混合，即为脲酶工作液；4℃避光保存，1 月有效。
- 4、Urea 加样：按照下表设置空白孔、标准孔、测定孔，溶液应按照顺序依次加入，并注意避免产生气泡。如果样品中的 Urea 浓度过高，可以减少样品用量或适当稀释后再进行测定。

加入物(μl)	空白孔	标准孔	测定孔
ddH ₂ O	1	—	—
尿素标准(5mmol/L)	—	1	—
待测样品	—	—	1
脲酶工作液	20	20	20
充分混匀，37℃水浴 15min。			
酚显色液	100	100	100
Urea Assay Buffer	100	100	100

5、Urea 测定：充分混匀，37℃水浴 20min，酶标仪测定 560nm 处吸光度，空白孔调零，读取各孔吸光度，分别为 $A_{\text{标准}}$ 、 $A_{\text{测定}}$ 。

计算：

$$\text{尿素}(\text{mmol/L}) = (A_{\text{测定}} / A_{\text{标准}}) \times 5\text{mmol/L}$$

式中： $A_{\text{测定}}$ = 测定孔的吸光度

$A_{\text{标准}}$ = 标准孔的吸光度

参考区间：

成年人血清尿素	2.9~8.2mmol/L
---------	---------------

注意事项：

- 1、本实验可测定 560 和 630nm 处的吸光度。
- 2、如果没有酶标仪，也可用分光光度计测定，但应注意加入试剂量不同，相应的检测次数会大大减少。
- 3、避免使用铵盐抗凝剂，否则会使结果偏高。
- 4、高浓度氟化物可抑制尿素酶，引起结果假性偏低。
- 5、采用酶标仪未调零情况下，空白管 OD 值一般在 0.08~0.18 之间，5mmol/L 标准管参

本产品仅用于科研


考范围一般在 0.35~0.55 之间。

- 6、以肉眼观察，一般情况下尿素浓度 $\leq 1\text{mmol/L}$ 可显淡绿色或淡蓝色，浓度 $\geq 2\text{mmol/L}$ 即可显蓝色，浓度 $\geq 15\text{mmol/L}$ 即可显深蓝色，一般情况下接近上限比接近下限更准确。
- 7、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 8、试剂开封后请尽快使用，以防影响后续实验效果。
- 9、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：6 个月有效。低温运输，按要求保存。

附录：参考标准曲线范围：Biorigin根据说明书操作步骤采用酶标仪 570nm 测定尿素标准在 0、0.2、0.4、0.6、0.8、1、3、5、10、15、20、25mmol/L 时的吸光度，据此 Biorigin 作出其标准曲线如下：

尿素(Urea)检测试剂盒(脲酶波氏微板法)

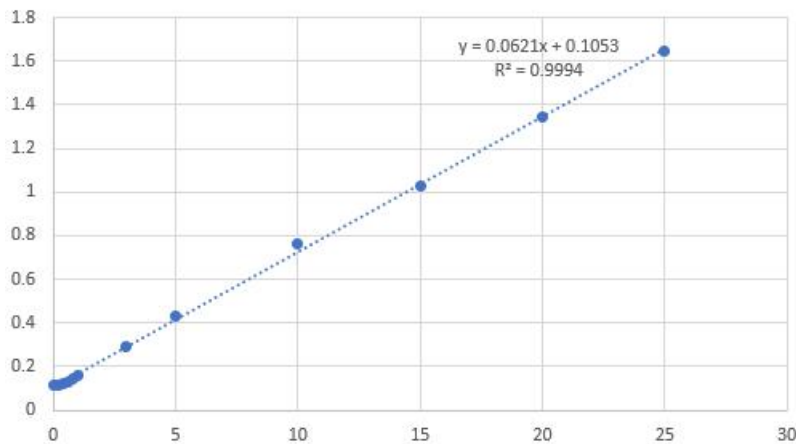

注意：由于试剂批次、仪器设备、操作方法及工作环境等不同，参考范围会有差异，该值仅供参考，对于要求精确计算尿素含量的，可以采用标准曲线进行多点测定；根据 Biorigin 测定经验显示，标准品浓度小于 0.2mmol/L 或大于 30mmol/L，标准曲线会有偏差。