

Alkaline Protease Assay Kit

碱性蛋白酶（AKPT）试剂盒说明书

货号:BN72307 |方法: 微板法| 规格: 48 样

一、产品简介:

蛋白酶广泛存在于动物内脏、植物茎叶、果实和微生物中，碱性蛋白酶（AKPT）是在碱性条件下将酪蛋白水解产生酪氨酸；酪氨酸与福林酚在碱性条件下反应生成蓝色化合物；该蓝色物质在 680nm 有特征吸收峰，进而得出碱性蛋白酶活性，

由于底物酪蛋白自身含有多种氨基酸，所以在检测过程中必须设置带有底物酪蛋白的对照，以扣除有干扰的背景值，排除假阳性。

二、测试盒组成和配制:

试剂名称	规格	保存要求	备注
提取液	液体 120mL×2 瓶	4℃保存	
试剂一	粉剂 mg×2 瓶	4℃保存	用前甩几下或 4℃离心使试剂落入试管底部，每瓶加入 3mL 试剂二 90℃加热搅拌至分散，再加 27mL 提取液搅拌至溶解；配置完的试剂 4℃保存，三天内用完。
试剂二	液体 10mL×1 瓶	4℃保存	用前摇匀。
试剂三	液体 50mL×1 瓶	4℃保存	用前摇匀。
试剂四	液体 40mL×1 瓶	4℃保存	用前摇匀。
试剂五	液体 10mL×1 棕色瓶	4℃保存	现用现配，用前甩几下或 4℃离心使试剂落入试管底部，再加 20mL 蒸馏水，4℃保存，一星期内用完。
标准品	粉体 mg×1 支 EP	4℃保存	若重新做标曲，则用到该试剂。

【注】：试剂一若在磁力搅拌器（带温控）上溶解，可用锡箔纸或保鲜膜盖住烧杯，以免溶解过程中水分蒸发过快。

三、所需的仪器和用品:

酶标仪、96 孔板、水浴锅、磁力搅拌器、可调式移液枪、蒸馏水

四、碱性蛋白酶（AKPT）活性测定:

建议正式实验前选取 2 个样本做预测定，了解本批样品情况，熟悉实验流程，避免实验样本和试剂浪费！

1、样本制备:

- ① 组织样本：测定管和对照管分别取约 0.1g 组织（水分充足的果实约 0.5g），加入 1mL 提取液，进行冰浴匀浆；12000rpm，4℃离心 15min；取上清液待测。

【注】：若增加样本量，可按照组织质量（g）：提取液体积（mL）为 1：5~10 的比例进行提取

- ② 细菌/真菌样本：测定管和对照管分别取约 500 万细胞加入 1mL 提取液，冰浴超声波破碎细胞（功率 300w，超声 3 秒，间隔 7 秒，总时间 3min）；12000rpm，4℃离心 15min；取上清液待测。

【注】：若增加样本量，按细菌或细胞数量（10⁴ 个）：提取液体积（mL）为 500~1000：1 比例进行提取

- ③ 液体样本：澄清液体直接检测；若浑浊则 12000rpm，4℃离心 15min；上清待测。

2、上机检测:

- ① 酶标仪预热 30min 以上，调节波长至 680nm，配制好的试剂一需预先 50℃水浴 10min。
- ② 在 2mL 离心管中依次加入下列试剂培养：

试剂名称（μL）	测定管	对照管
----------	-----	-----

样本	500	500
试剂一	500	
40℃振荡培养 10min, 同时, 余下的试剂一须单独 40℃振荡培养 10min		
上步单独 40℃培养的试剂一		500
试剂三	500	500
混匀, 室温静置 10min, 1500rpm (须准确), 4℃离心 10min, 上清液待用		


③ 显色反应: 在 EP 管中依次加入:

上清液	250	250
试剂四	375	375
试剂五	250	250
40℃水浴 20min, 取 200μL 澄清液 (若浑浊, 可 1500rpm 离心 10min) 至 96 孔板中, 于 680nm 读取吸光值 A, $\Delta A = A_{\text{测定管}} - A_{\text{对照管}}$ 。		

注意: 本操作流程适用于绝大多数常规样本检测, 实验条件可根据实际样本状态适度微调; 针对特殊类型样本, 我司技术支持可提供专属优化建议。

五、结果计算:

1、标准曲线方程: $y = 0.0626x + 0.0011$, x 是标准品质量 (μg), y 是 ΔA 。

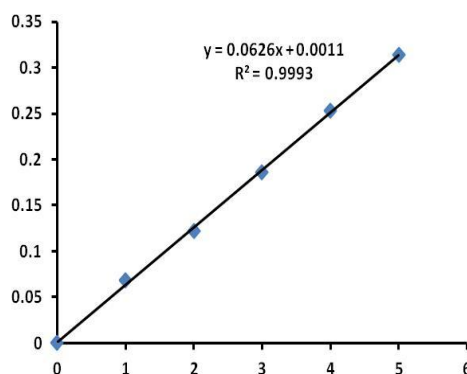

标准曲线示意图

说明: 标准曲线由标准品测定获得, 具体制作方法详见随货说明书或咨询技术支持。

2、按照蛋白浓度计算

活性单位定义: 40℃每毫克蛋白每分钟催化水解产生 $1\mu\text{g}$ 酪氨酸为 1 个酶活单位。

$$\begin{aligned} \text{AKPT 活性}(\mu\text{g}/\text{min}/\text{mg prot}) &= (\Delta A - 0.0011) \div 0.0626 \times (V_3 \div V_2) \div (C_{\text{pr}} \times V_1 \div V) \div T \times D \\ &= 19.2 \times (\Delta A - 0.0011) \div C_{\text{pr}} \times D \end{aligned}$$

3、按照样本质量计算

活性单位定义: 40℃每克样品每分钟催化水解产生 $1\mu\text{g}$ 酪氨酸为 1 个酶活单位。

$$\begin{aligned} \text{AKPT 活性}(\mu\text{g}/\text{min}/\text{g 鲜重}) &= (\Delta A - 0.0011) \div 0.0626 \times (V_3 \div V_2) \div (W \times V_1 \div V) \div T \times D \\ &= 19.2 \times (\Delta A - 0.0011) \div W \times D \end{aligned}$$

4、按照细胞数量计算

活性单位定义: 40℃每 10^4 个细胞每分钟催化水解产生 $1\mu\text{g}$ 酪氨酸为 1 个酶活单位。

$$\begin{aligned} \text{AKPT 活性}(\mu\text{g}/\text{min}/10^4 \text{ cell}) &= (\Delta A - 0.0011) \div 0.0626 \times (V_3 \div V_2) \div (\text{细胞数量} \times V_1 \div V) \div T \times D \\ &= 19.2 \times (\Delta A - 0.0011) \div \text{细胞数量} \times D \end{aligned}$$

5、按液体体积计算:

活性单位定义: 40℃每毫升液体样本每分钟催化水解产生 $1\mu\text{g}$ 酪氨酸为 1 个酶活单位。

$$\text{AKPT 活性}(\mu\text{g}/\text{min}/\text{mL}) = (\Delta A - 0.0011) \div 0.0626 \times (V_3 \div V_2) \div V_4 \div T \times D = 19.2 \times (\Delta A - 0.0011) \times D$$

V---提取液体积, 1mL; V1---样本体积, 0.5mL; V2---显色步骤上清液体积, 0.25mL;
V3---培养步骤总反应体积, 1.5mL; V4---液体样本, 0.5mL; 酪氨酸分子量---181.19;
T---反应时间, 10min; W---样本质量, g; D---稀释倍数, 未稀释即为 1;
Cpr---粗酶液蛋白质浓度 (mg/mL), 建议使用本公司的 BCA 蛋白质含量测定试剂盒检测。